


エッジレス 384ウェル プレート



RNase/DNase/
HumanDNAフリー

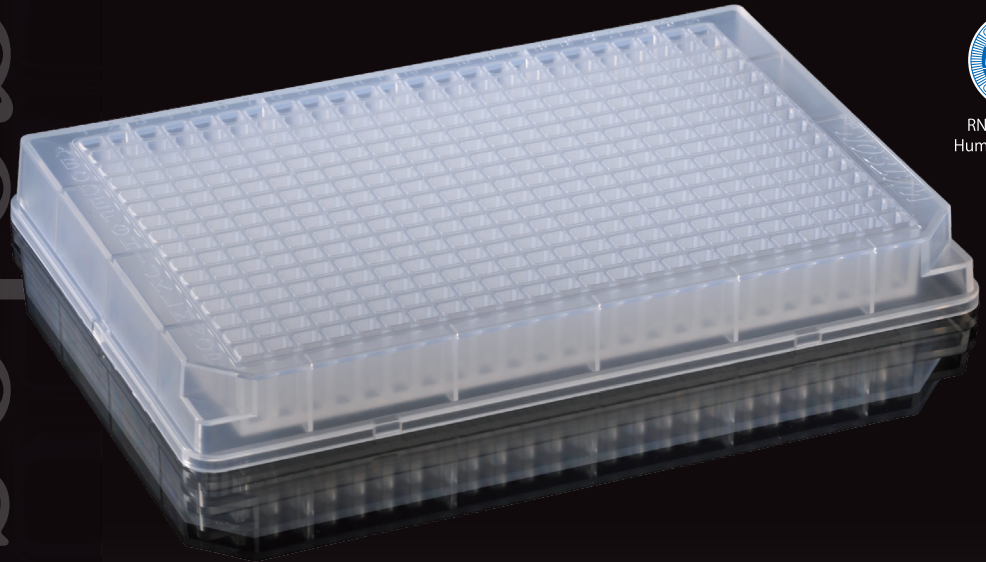


**角穴・平底の3次元構造内部に
エッジが存在しない**

“ユニークなエッジレス角穴形状”




ウェル断面図

- ウェルの底にも側面にもエッジがないので液切れが良く、メニスカスが少ない分注時の気泡の発生も起きにくい

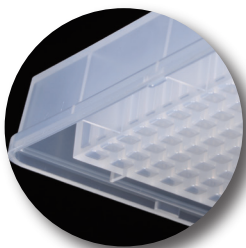

- ウェル内の微量のサンプルでも視認しやすい平らな底面

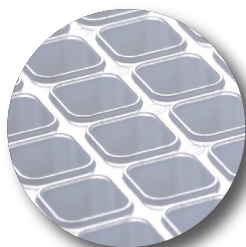

- すべてのウェルについた独立リムはシールを確実にしてコンタミを防止

Something Different.

WATSON BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988




Edges
384well Plate

角穴・平底なのにどこにもエッジがない ユニークなラウンドウェル形状。

エッジレス ウェル


ウェル内にエッジがないので...

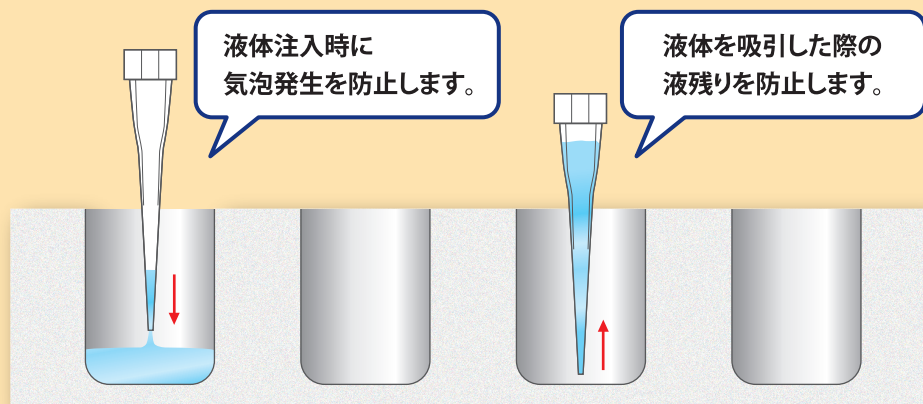


※液体の粘性や表面張力、分注機のパラメータ設定等により必ずしも保証されるものではありません。

従来の ウェル

従来のウェルはエッジ部分に
気泡や液残りが発生。

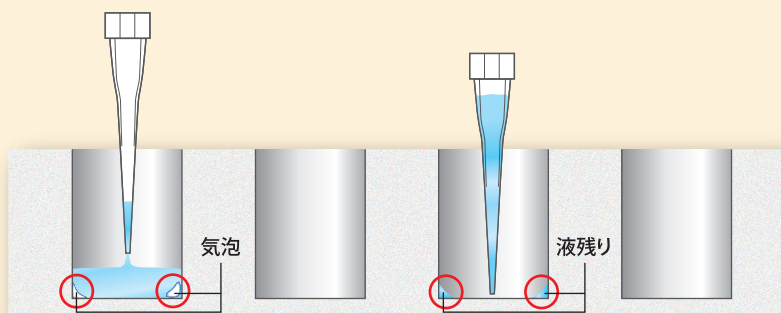

Edgeless 384well Plate

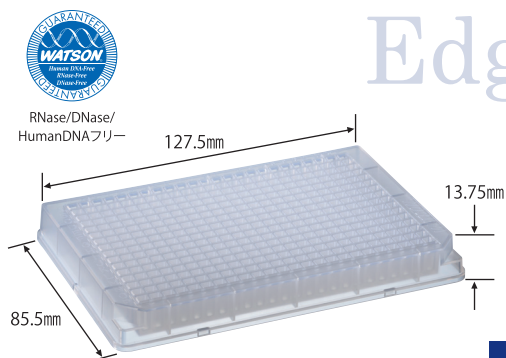

仕様:

容量 100 μ L / ウェル ウェル形状 エッジレススクエア
材質 PP(ポリプロピレン) ウェル底 エッジレスフラット

| 品番 | 品名 | 入数 | 大箱 |
|---------------|------------------|--------------|------|
| 1825-384E-110 | エッジレス 384ウェルプレート | 50枚 (5枚×10袋) | 250枚 |

Something Different.
WATSON® BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988
<https://www.watson.co.jp>

発売元
ワトソン株式会社
E-mail: tcr@watson.co.jp

東日本営業所
〒116-0003
東京都荒川区南千住6丁目57-12
TEL: 03-5615-3591 FAX: 03-5615-3592

西日本営業所
〒651-2241
兵庫県神戸市西区室谷2-2-7
TEL: 078-991-4489 FAX: 078-991-4491

製造元
深江化成株式会社



※掲載価格には消費税は含まれておりません。※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。