

Something Different.

WATSON ® BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988



大量サンプルのラベル管理の煩わしさを解消!

ジャケットに内蔵されたICタグ情報を電波で読み取り


RFID サンプル管理システム

R-ISM [®]

複数のサンプル情報を
一括管理!



ICタグジャケット

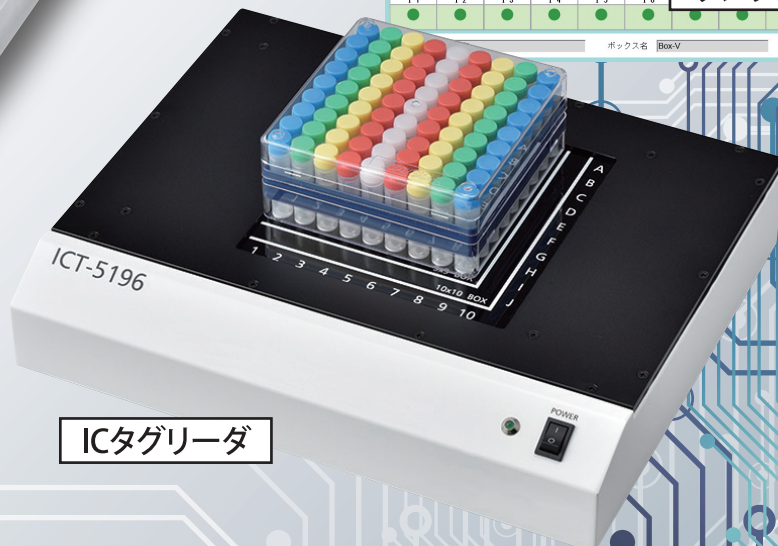

ICタグリーダー



サンプル管理ソフトウェア

【電波だから霜が付いていても、BOX丸ごとでも読み取り可能!】

メモやラベルもOK

ICタグジャケットはチューブ本体に書かれたメモや識別シールなどに影響を与えることなく装着できます。



霜取り不要

電波による読み取りなので、ディープフリーザ(-80℃)から取り出した直後でも読み取りOK!



サンプル情報を一括管理

ボックス内サンプル情報を専用ソフトで一括管理。目的のサンプルをスピーディーに検索可能です。

既存チューブに装着可能

専用チューブは必要なく、今お使いのチューブに装着可能です。ご使用前にジャケットサンプルにてご確認ください

RFID
サンプル管理システム

R-ISM®

固有のID情報を埋め込んだICタグを無線通信によって読み取り、サンプルデータベースと紐付けてPC上で管理するシステムです。ICタグを埋め込んだ「ICタグジャケット」を保管用チューブに装着し、サンプル情報を管理します。

ICタグジャケット

スクリーキャップチューブ用

ワトソンおよび汎用スクリーキャップチューブ用
(対応チューブ径: Φ10.20mm以下)



175-331

マルチタイプ
(対応チューブ径: Φ10.40mm以下)

175-332

ジャケット底面



市販品
フリーズボックス※
使用可能!

※9×9、10×10タイプに対応




スクリーキャップチューブ用の底面には目視可能な2Dデータ入り
※ICタグは底面内側に埋め込み

実際にお使いになるチューブはジャケットサンプルにてご確認ください

品番	品名	入数	価格
175-331	ICタグジャケット スクリーキャップチューブ用	100個	28,000円
175-332	ICタグジャケット マルチタイプ	100個	28,000円

クライオチューブ用

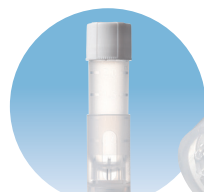

975-334


側面にはICタグと同一のユニークIDを刻印しています。

ジャケット底面




品番	品名	入数	価格
975-334	ICタグジャケット クライオチューブ用	100個	28,000円

ICタグリーダ※

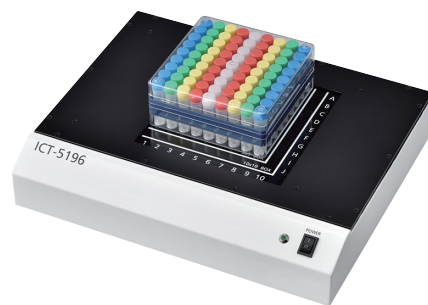

凍結状態でもボックスごと一括読み取り。ボックス内の保管位置情報の取得も可能。

サンプル管理ソフトウェア※

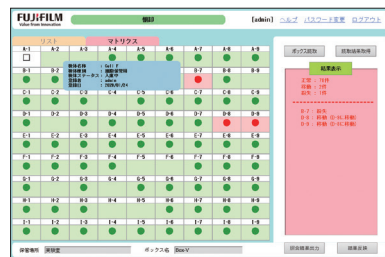

「いつ、誰が、どこに」保管したかを一元管理。目的の検体をスピーディーに検索可能です。

※販売元: 富士フイルムイメージングシステムズ(株)

Something Different.
WATSON® BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988

<https://www.watson.co.jp>

発売元

ワトソン株式会社
E-mail: tcr@watson.co.jp

東日本営業所
〒116-0003
東京都荒川区南千住6丁目57-12
TEL: 03-5615-3591 FAX: 03-5615-3592

西日本営業所
〒651-2241
兵庫県神戸市西区室谷2-2-7
TEL: 078-991-4489 FAX: 078-991-4491

製造元
深江化成株式会社

※掲載価格には消費税は含まれておりません。※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。