

日本製

# 耐久性抜群、容量カスタマイズ可能、 驚異のコストパフォーマンス！

“容量変更キット(別売)”で任意の容量にカスタマイズ!!  
オリジナル容量の専用ピペッターとして変身可能です。

# NEXT



- キノコ型プッシュボタン
- 脱着可能なイジェクター
- わずか 80g! 軽くて丈夫な素材  
※NT-F1000、NT-F5000 を除く
- 50万回ストロークテストパス
- 安定的な高い精度の設計
- もちやすいボディーデザイン



容量固定ピペッター  
MINIATURE FIXED VOLUME PIPETTE

Something Different.

# WATSON

BIO LAB

MADE IN JAPAN SINCE 1988



# 同じ容量での繰り返し使用に。

**容量変更可** 好みの容量にセットして  
**“オリジナル固定ピペッター”**として使えます。

よく使う容量に合わせられるから


作業効率 **アップ!!**

同じ容量で使うなら

シングルピペッターよりも **おトク!!**


## ■各機種の吸引吐出設定量の変更に伴う繰り返し精度(吸引吐出量のばらつき)

初期設定の容量で最も高い精度が出ます。  
 ご使用になる容量より大容量で、なるべく近い容量の機種をお選びください。

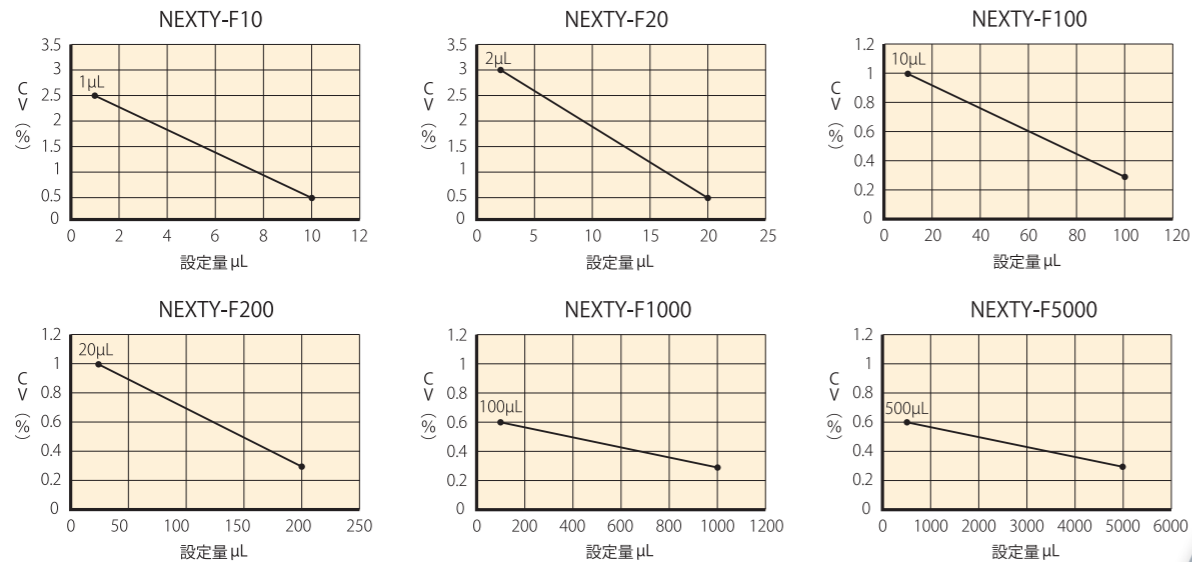

## 容量変更キット (別売)

容量をカスタマイズするための専用治具セットです。

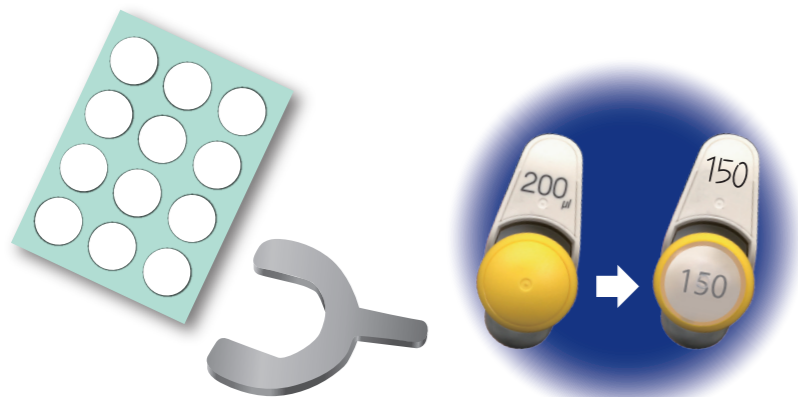

### 各機種の設定可能範囲

品番	設定可能範囲
NEXTY-F10	1 μL ~ 10 μL
NEXTY-F20	2 μL ~ 20 μL
NEXTY-F100	10 μL ~ 100 μL
NEXTY-F200	20 μL ~ 200 μL
NEXTY-F1000	100 μL ~ 1000 μL
NEXTY-F5000	500 μL ~ 5000 μL

▶ 容量変更方法の詳細情報は <https://www.watson.co.jp/product/pipetter/vol-change.html>



**NEXTYシリーズに  
容量固定が仲間入り!**

## キノコ型プッシュボタン



親指にかかる負担を軽減した独自の押しやすいデザイン。



容量別に色分けされたカラーコードの役割も果たしています。




スプリング機構の設計により、極めて安定したストローク。

## 押しやすいイジェクトボタン



分注時は邪魔にならずイジェクト時には押しやすいデザイン。

## ラピッドクリーニング

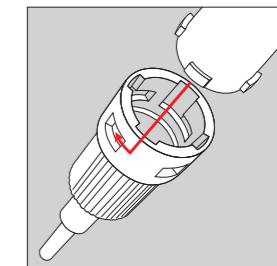

ノズルロック機構によりノズルコーンの取り外しが簡単なのでクリーニングがやすくオートクレーブも可能。

## 扱いやすいボディデザイン

スタンダードサイズで操作性が抜群です。細いグリップと高い位置のフィンガーレストにより扱いやすくなっています。

## 軽くて丈夫な素材

丈夫で壊れにくい材質を採用し、適度な軽さを実現。また、内部のプランジャーは耐薬品性能の高いPBT樹脂製のためサンプルが付着し固化的することが少なくストロークがいつまでも滑らか。クリーニングも容易です。

## 日本製だから安心



ネクスティピペッターは部品の製造から組立、精度検査まで全て国内工場にて行っております。キャリブレーションはもちろん、修理やメンテナンスに万全の体制を整えております。




### 厳格な品質管理

品質検査は工場内の専用環境においてISO8655の基準に従って実施されています。

### 1年間の品質保証

ネクスティピペッターはご購入から1年間の製品保証を致しております。シリアルナンバーごとの精度検査レポートと製品保証が添付されています。

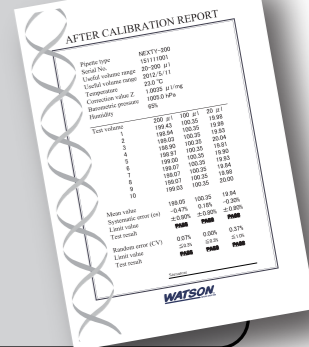

品番	品名	測定容量	精度	再現性	適合チップ	入り数	価格
NT-F10	NEXTY-F10 容量固定ピペッター 10μL	10μL	±1.0%	≤0.5%	204 / 207	1	¥4,800
NT-F20	NEXTY-F20 容量固定ピペッター 20μL	20μL	±1.0%	≤0.5%	703 / 705	1	¥4,800
NT-F100	NEXTY-F100 容量固定ピペッター 100μL	100μL	±0.8%	≤0.3%	703 / 705	1	¥4,800
NT-F200	NEXTY-F200 容量固定ピペッター 200μL	200μL	±0.8%	≤0.3%	703 / 705	1	¥4,800
NT-F1000	NEXTY-F1000 容量固定ピペッター 1000μL	1000μL	±0.8%	≤0.3%	706 / 804	1	¥4,800
NT-F5000	NEXTY-F5000 容量固定ピペッター 5000μL	5000μL	±0.8%	≤0.3%	401	1	¥6,500
NT-FVC	容量変更キット					1	¥500