

日本製

# 耐久性抜群、容量カスタマイズ可能、 驚異のコストパフォーマンス！

“容量変更キット(別売)”で任意の容量にカスタマイズ!!  
オリジナル容量の専用ピペッターとして変身可能です。

# NEXT



- キノコ型プッシュボタン
- 脱着可能なイジェクター
- わずか 80g! 軽くて丈夫な素材  
※NT-F1000、NT-F5000 を除く
- 50万回ストロークテストパス
- 安定的な高い精度の設計
- もちやすいボディーデザイン



容量固定ピペッター  
MINIATURE FIXED VOLUME PIPETTE

Something Different.

# WATSON

BIO LAB

MADE IN JAPAN SINCE 1988



# 同じ容量での繰り返し使用に。

**容量変更可** 好みの容量にセットして  
**“オリジナル固定ピペッター”**として使えます。

よく使う容量に合わせられるから


作業効率 **アップ!!**

同じ容量で使うなら

シングルピペッターよりも **おトク!!**


## ■各機種の吸引吐出設定量の変更に伴う繰り返し精度(吸引吐出量のばらつき)

初期設定の容量で最も高い精度が出ます。  
 ご使用になる容量より大容量で、なるべく近い容量の機種をお選びください。

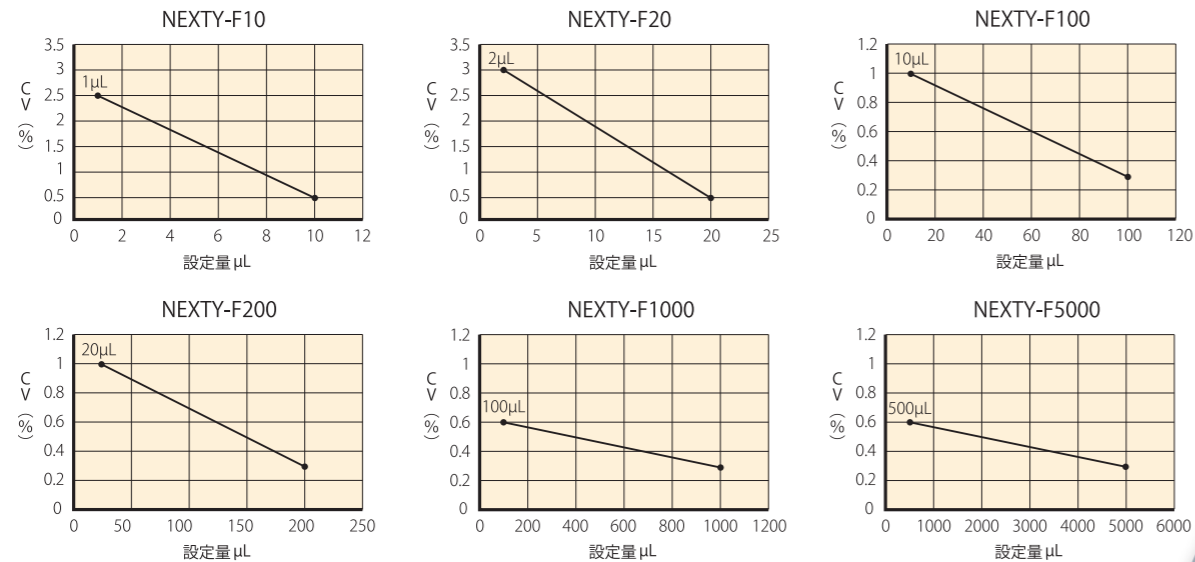

## 容量変更キット (別売)

容量をカスタマイズするための専用治具セットです。

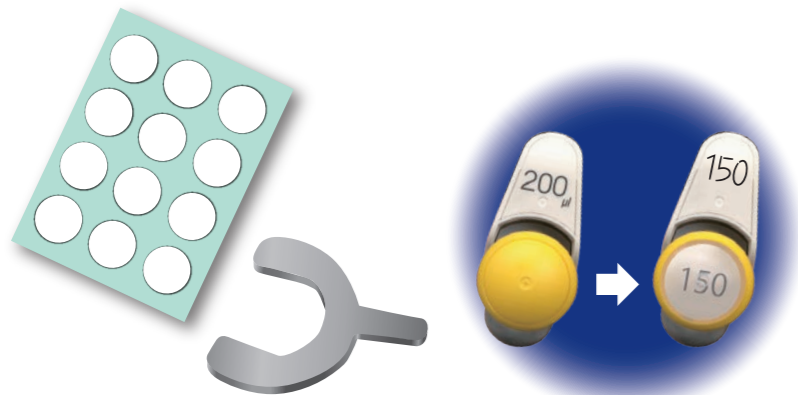

### 各機種の設定可能範囲

| 品番          | 設定可能範囲           |
|-------------|------------------|
| NEXTY-F10   | 1 μL ~ 10 μL     |
| NEXTY-F20   | 2 μL ~ 20 μL     |
| NEXTY-F100  | 10 μL ~ 100 μL   |
| NEXTY-F200  | 20 μL ~ 200 μL   |
| NEXTY-F1000 | 100 μL ~ 1000 μL |
| NEXTY-F5000 | 500 μL ~ 5000 μL |

▶ 容量変更方法の詳細情報は <https://watson.co.jp/product/pipettor/vol-change>



**NEXTYシリーズに  
容量固定が仲間入り!**

## キノコ型プッシュボタン



親指にかかる負担を軽減した独自の押しやすいデザイン。



容量別に色分けされたカラーコードの役割も果たしています。




スプリング機構の設計により、極めて安定したストローク。

## 押しやすいイジェクトボタン



分注時は邪魔にならずイジェクト時には押しやすいデザイン。

## ラピッドクリーニング

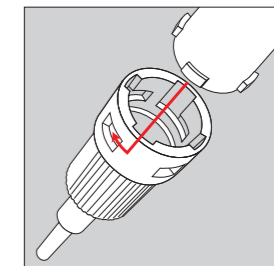

ノズルロック機構によりノズルコーンの取り外しが簡単なのでクリーニングがやすくオートクレーブも可能。

## 扱いやすいボディデザイン

スタンダードサイズで操作性が抜群です。細いグリップと高い位置のフィンガーレストにより扱いやすくなっています。

## 軽くて丈夫な素材

丈夫で壊れにくい材質を採用し、適度な軽さを実現。また、内部のプランジャーは耐薬品性能の高いPBT樹脂製のためサンプルが付着し固化的することが少なくストロークがいつまでも滑らか。クリーニングも容易です。

## 日本製だから安心



ネクスティピペッターは部品の製造から組立、精度検査まで全て国内工場にて行っております。キャリブレーションはもちろん、修理やメンテナンスに万全の体制を整えております。




### 厳格な品質管理

品質検査は工場内の専用環境においてISO8655の基準に従って実施されています。

### 1年間の品質保証

ネクスティピペッターはご購入から1年間の製品保証を致しております。シリアルナンバーごとの精度検査レポートと製品保証が添付されています。

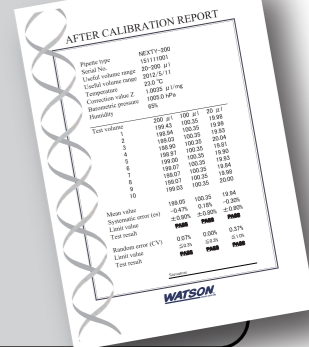

| 品番       | 品名                           | 測定容量   | 精度    | 再現性   | 適合チップ     | 入り数 | 価格     |
|----------|------------------------------|--------|-------|-------|-----------|-----|--------|
| NT-F10   | NEXTY-F10 容量固定ピペッター 10μL     | 10μL   | ±1.0% | ≤0.5% | 204 / 207 | 1   | ¥4,800 |
| NT-F20   | NEXTY-F20 容量固定ピペッター 20μL     | 20μL   | ±1.0% | ≤0.5% | 703 / 705 | 1   | ¥4,800 |
| NT-F100  | NEXTY-F100 容量固定ピペッター 100μL   | 100μL  | ±0.8% | ≤0.3% | 703 / 705 | 1   | ¥4,800 |
| NT-F200  | NEXTY-F200 容量固定ピペッター 200μL   | 200μL  | ±0.8% | ≤0.3% | 703 / 705 | 1   | ¥4,800 |
| NT-F1000 | NEXTY-F1000 容量固定ピペッター 1000μL | 1000μL | ±0.8% | ≤0.3% | 706 / 804 | 1   | ¥4,800 |
| NT-F5000 | NEXTY-F5000 容量固定ピペッター 5000μL | 5000μL | ±0.8% | ≤0.3% | 401       | 1   | ¥6,500 |
| NT-FVC   | 容量変更キット                      |        |       |       |           | 1   | ¥500   |